


Hematonix GS1



Установка сенсора:

Шаг 1: Определите место установки системы:

Выберите участок кожи, который обычно остается ровным во время вашей обычной повседневной деятельности (без изгибов и складок). Чтобы избежать дискомфорта или раздражения кожи, выберите другой участок, отличный от того, который использовался в последний раз.

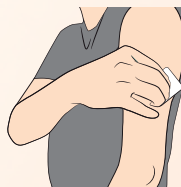

Протрите спиртовой салфеткой выбранное место. Дождитесь, пока спирт высохнет – для наилучшего соприкосновения пластыря с кожей.


Шаг 2: В этой упаковке находится стерильный электрод сенсора. Снимите наклейку с этого контейнера




Это аппликатор. Снимите с него крышку.

Шаг 3: Поместите раскрытую упаковку электрода сенсора на ровную, устойчивую поверхность и удерживайте ее одной рукой, чтобы предотвратить ненужное перемещение упаковки во время сборки.


Возьмите аппликатор сенсора другой рукой, поместите его на упаковку электрода сенсора, затем плотно прижмите аппликатор до упора, пока не услышите щелчок.

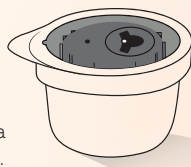


Совместите треугольный выступ

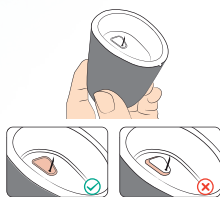


Шаг 4: Извлеките аппликатор из упаковки с сенсором, убедившись, что сенсор и внутренняя поверхность аппликатора находятся на одном уровне. Сенсор готов к установке. **ВНИМАНИЕ:** В аппликаторе сенсора теперь установлен электрод. НЕ прикасайтесь к внутренней стороне готового к нанесению аппликатора сенсора и не кладите его обратно в упаковку.

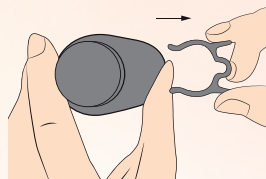

Шаг 5: Чтобы снять фиксатор на аппликаторе – слегка нажмите на нажимную часть зажима в середине, затем потяните за сам зажим до снятия.

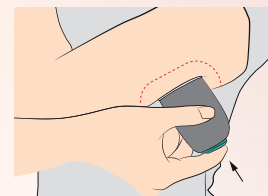


Шаг 6: Поместите аппликатор на выбранный уже очищенный и сухой участок кожи. При установке сенсора на руку – метка совмещения на аппликаторе (треугольный выступ на передней части аппликатора) должна быть направлена вверх, при установке на живот – вдоль расположения линии ремня параллельно линии середины пупка. Прижмите плотно аппликатор к месту установки, держа его строго перпендикулярно поверхности кожи и прижимая его к телу. Нажмите на кнопку аппликатора до хлопка для установки сенсора. Подержите 2-3 секунды для приклеивания пластыря к коже.

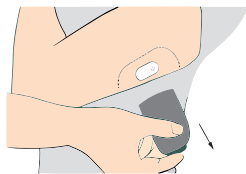

Шаг 7: Осторожно отведите аппликатор сенсора от тела строго перпендикулярно.

Разгладьте пластырь сенсора на коже. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Применение сенсора может привести к образованию синяков или капиллярному кровотечению. В случае появления кровотечения извлеките сенсор и обратитесь к своему лечащему врачу.

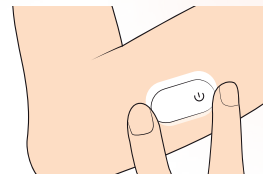

Шаг 8: Убедитесь, что сенсор надежно закреплен после нанесения. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Используйте свой телефон для соединения с сенсором сразу после установки.

Связь сенсора со смартфоном:

Сенсор СНМГ и приложение Hematonix соединяются через сеть Bluetooth (BLE). Сенсор отправляет в приложение данные о глюкозе и уведомления-предупреждения, связанные с работой системы. Сенсор и приложение проверяют целостность полученных данных после беспроводной передачи. Качество соединения соответствует спецификации Bluetooth v5.0. Приложение предназначено для приема радиочастотных сообщений только от распознанных и сопряженных сенсоров.

Извлечение сенсора

По истечении срока эксплуатации сенсора приложение перестанет обновлять данные о содержании глюкозы, и уведомление покажет, что 16-ти дневный срок сенсора истек, в результате чего требуется извлечение и замена сенсора в соответствии данным разделом Руководства по эксплуатации.

1. Открепите удерживающий пластырь (если он был прикреплен к системе для дополнительной фиксации) по всему периметру вокруг сенсора и осторожно потяните за край удерживающего пластыря, который фиксирует сенсор со встроенным пластырем на коже. Затем также открепите встроенный пластырь сенсора, не задевая и не перемещая сам сенсор.
2. Потяните сенсор вместе со встроенным и удерживающим пластырями вертикально вверх. Остатки клея на коже можно удалить теплой водой с мылом.
3. Обработайте место установки спиртовой салфеткой и при необходимости наложите пластырь.

Замените сенсор в случае дискомфорта, раздражения (местная аллергическая реакция) или капиллярного кровотечения.

Важно помнить, что сенсор – стерильное изделие одноразового использования. Не пытайтесь переустановить уже использованный сенсор, а замените его на новый. Использованный сенсор утилизируйте в соответствии с местным законодательством.

Техническое обслуживание системы непрерывного мониторинга Hematonix GS1

Система не имеет обслуживаемых частей. Обслуживание программного обеспечения осуществляется путем его обновления пользователем в результате получения соответствующего уведомления в личный кабинет приложения Hematonix.

Устранение неисправностей

Сенсор является прецизионным прибором. Если он выходит из строя, его можно только вернуть представителю производителя в авторизованный сервисный центр для учета дефектуры (при наличии) или направить на утилизацию.

Климатические условия хранения Условия хранения должны быть следующими:


- Допустимый температурный диапазон: +4°C – +25°C
- Допустимый диапазон относительной влажности воздуха: от 10% до 90
- Допустимый диапазон атмосферного давления: от 70 кПа до 106 кПа
- Не кладите тяжелые предметы на упаковку с системой. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и дождя.

Гарантийный срок хранения:

Упаковка электрода сенсора и аппликатора со встроенным сенсором – 18 месяцев.


Если Вы временно не используете сенсорную систему, храните компоненты в прохладном, сухом, чистом и хорошо проветриваемом помещении.

Инструкция для сенсора Hematonix и официального приложения Hematonix для телефонов на Android и iOS

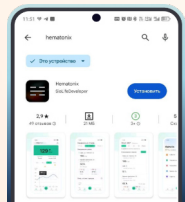

Шаг 1: Скачайте официальное приложение Hematonix на телефон и установите его.



Шаг 2: Откройте приложение.

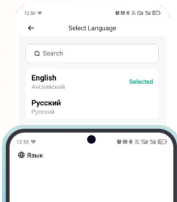

Шаг 3: Для удобства смените язык на русский.

Шаг 4: Нажмите "Регистрация".

Шаг 5: Нажмите "Подтвердить". Поставьте две галочки и нажмите "Подтвердить".

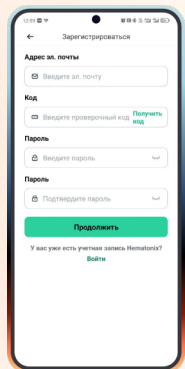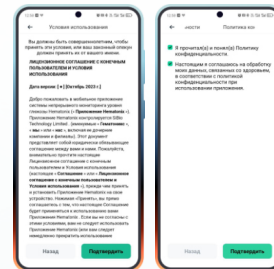

Шаг 6: Введите адрес электронной почты (ваш или ребенка). Вам потребуется два действующих адреса электронной почты, если вы хотите настроить удаленный доступ к показаниям ребенка.

Шаг 7: Нажмите "Получить код".



Проверьте почту (если письмо не приходит в течение нескольких минут, проверьте папку Спам).

Шаг 8: Введите код из письма.

Шаг 9: Установите пароль.

Шаг 10: Подтвердите его.

Шаг 11: Нажмите "Продолжить".

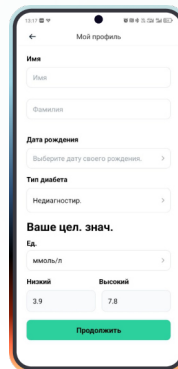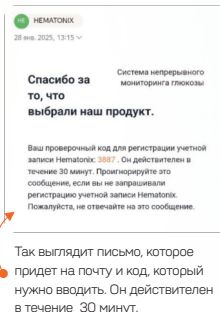



Шаг 12:

- Введите имя и фамилию (язык не имеет значения).
- Укажите дату рождения.
- Выберите тип диабета.
- Укажите единицы измерения (ммоль/л).
- Нажмите "Продолжить".

ВНИМАНИЕ! Обязательно запишите адрес электронной почты и пароль, использованные при регистрации.


Шаг 13:

- Включите приоритет "Не беспокоить".
- Установите значение сигналов низкого и высокого уровня глюкозы.
- Включите сигнал "Потеря сигнала" (уведомления будут приходить при потере связи).
- Нажмите "Готово".

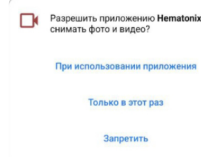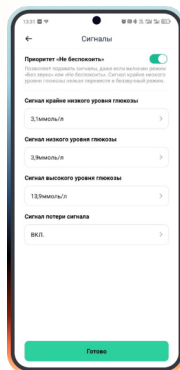

Шаг 14: Разрешите приложению доступ, если телефон запросит разрешения.

ВНИМАНИЕ! Переходите к следующему шагу, только если у Вас установлен сенсор! Если сенсор еще не установлен, установите его и снова нажмите "Отсканируйте код для подключения".

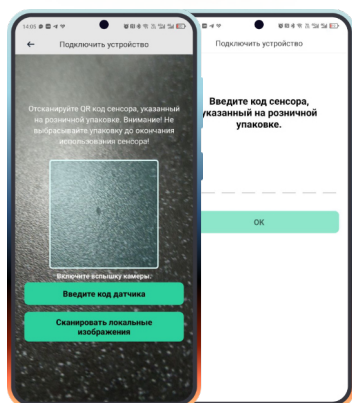


Шаг 15: Отсканируйте QR-код с упаковки.

Разрешите приложению доступ, если телефон запросит разрешения. Сканируйте QR-код с упаковки. Если сканирование успешно, сенсор начнет прогреваться (60 минут). Затем появятся показания.


Если сканирование не удастся, нажмите "Введите код сенсора" и введите его вручную. Введите код сенсора, который указан на упаковке под QR-кодом смотрите информацию о расположении выше. После того, как код введен, нажмите "OK". Если код введен верно, сенсор будет запущен и начнется прогрев 60 минут. Затем появятся показания.

На этом изображении показано как выглядит QR-код и где находится код сенсора.

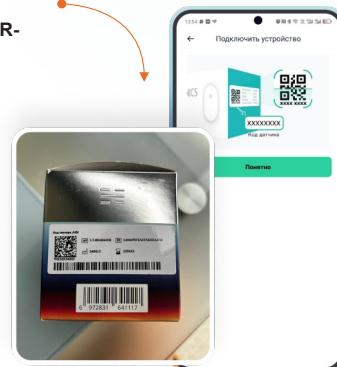


Если после сканирования или введения кода появилось такое окно, нажмите «Настройки». Вы перейдете в настройки телефона.

В настройках вашего телефона необходимо дать разрешения приложению Hematonix.

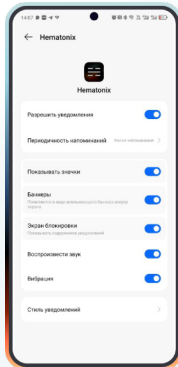


В настройках вашего телефона необходимо дать разрешения приложению Hematonix.

Если повторно всплывает такое окно, нажмите "Настройки" и снова перейдите в настройки телефона. В списке приложений найдите Hematonix. Нажмите на него. Дайте доступ к режиму "Не беспокоить" и нажмите "Разрешить".

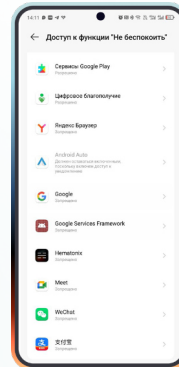

Внимание! Нельзя прерывать или отменять процесс прогрева!

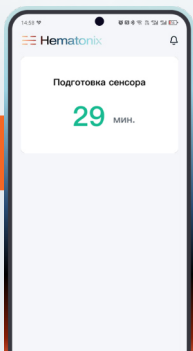

Установка приложения Hematonix, закончена!

Благодарим Вас за использование системы непрерывного мониторинга глюкозы Hematonix GS!

Желаем удобного и эффективного мониторинга. Если у вас возникнут вопросы, мы всегда готовы помочь.

Сведения об уполномоченном представителе производителя

Наименование организации

- Полное: Общество с ограниченной ответственностью «Системы медицинского мониторинга», Россия
- Сокращенное: ООО «Системы медицинского мониторинга», Россия
- Юридический адрес: 119180, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Якиманка, д. 22
- Контактный телефон: +7 (495) 135-82-86
- Почта: help@hematonix.ru
- Сайт: https://hematonix.ru/